


Ethox

BOLSA DE INFUSIÓN DE PRESIÓN INFU-SURG®

LIBRE DE LÁTEX | DE UN SOLO USO | DESECHABLE | CE MARK

La bolsa de infusión de presión Infu-Surg®, libre de látex es un dispositivo seguro, confiable y de gran calidad para tratamientos de infusión intravenosa e intra arterial, incluyendo (línea A) monitorización de presión. Diseñado para uso en un solo paciente, el Infu-Surg® puede ayudar a prevenir y controlar la trans-contaminación e infecciones adquiridas en el hospital. El Infu-Surg® es un producto rentable que los profesionales médicos han confiado por décadas.

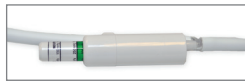

Vista de 360 grados del calibrador de código de color facilita monitoreo de la presión mientras la válvula de alivio previene sobre inflado



Valvula de tres vías asegura un control preciso de presión mientras la bomba ovalada permite un inflado rápido, todo con una mano



El gancho en la bolsa permite un uso eficiente del sistema al no tener que remover la bolsa de infusión de la pértiga de IV. Mantiene la bolsa de fluido en posición correcta

BOLSA DE INFUSIÓN DE PRESIÓN INFU-SURG®

- La válvula de alivio de presión previene sobre inflado a presiones superiores de 330mmHg
- Bomba grande y ovalada permite inflado rápido y fácil de la bolsa
- El inflado y desinflado con una sola mano permite un uso fácil y requiere entrenamiento mínimo
- Apto para uso con fuentes externas de inflado
- El calibrador de embolo con código de color provee una precisa monitorización de la presión (0-300mmHg)
- La llave de tres pasos permite un control preciso de presión
- Producto confiable - 100% probado
- La bolsa se infla rápida y fácilmente

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	PK
4005H	500ml	Infu-Surg® con Enganche	5
4010H	1000ml	Infu-Surg® con Enganche	5
4030	3000ml	Infu-Surg®	5